

Miðeyragervilíffæri


Áhöld til undirbúnings á brjóski



KURZ® Precise
Brjóskhnífasett



Brjóksýnistangarsett

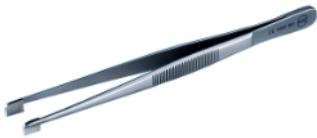

Brjósktöng af Schimanski gerð



HEINZ KURZ GMBH
TUEBINGER STR. 3
72144 DUSSLINGEN
GERMANY

Efnisyfirlit

1 Um þetta skjal	3	7.7 Fyrirhugaður notkunarstaður	6
1.1 Orðalisti tákna	3	8 Áætlaður klínískur ávinningur	7
1.2 Merking öryggisupplýsinga	3	9 Mögulegir fylgikvillar og aukaverkanir	7
1.3 Viðbótarupplýsingar	3	10 Samþætting við aðrar aðgerðir	7
1.4 Öryggistengdar breytingar	3	11 Geymslupól og geymsla	7
2 Mikilvægar öryggisupplýsingar	4	12 Meðhöndlun	7
3 Vörunúmer / tilvísun	4	13 Leiðbeiningar fyrir notkun	7
4 Umfang afhendingar	4	13.1 KURZ Precise brjósksknífur	7
5 Umbúðir og dauðhreinsun	4	13.1.1 Búðu til brjóskskníf til ígræðslu af tilgreindri þykkt	7
6 Lýsing vöru	4	13.1.2 Fellið pressað	10
6.1 Almennar upplýsingar	4	13.2 Brjóskskníf af Schimanski gerð: Haldið á brjóskskinu	11
6.2 Uppbygging og notkun	5	13.3 Brjósksknífstöng: Brjóskskníf búið til	11
6.3 Efni	5	14 Förgun	12
6.4 Fylgihlutir	5	15 Forskriftir	13
6.5 Önnur tæki sem á að nota með tækinu	5	15.1 KURZ Precise brjósksknífur	13
7 Fyrirhugað notkun	6	15.1.1 KURZ Precise brjósksknífasett	13
7.1 Fyrirhugað notkun	6	15.1.2 Fylgihlutir, einnota efni og varahlutir	13
7.2 Ábendingar	6	15.2 Brjósksknífstöng af Schimanski gerð	13
7.3 Fráabendingar	6	15.3 Brjósksknífstöng	14
7.4 Áætlað sjúklingaþýði	6	15.3.1 Brjósksknífstangarsett	14
7.5 Fyrirhugaður notandi	6	15.3.2 Varahlutir	14
7.6 Áætlaður líftími	6		

1 Um þetta skjal

1.1 Orðalisti tákna

Tákn	Lýsing
	Varúð: Fylgdu notkunarleiðbeiningum
	Notist ekki ef umbúðir eru skemmdar
	Geymist fjarri beinu sólarljósi
	Haltu þurru
	Dauðhreinsað með geislun
	Má ekki endurnota
	Má ekki endursótthreinsa
	Smitsæfandi tálmakerfi
	Lækningatæki
	Skráarnúmer
	Lotunúmer
	Einkvæmt auðkenni tækis (UDI)
	HIBC: Health Industry Barcode
	Magn í umbúðaeiningu
	Framleiðandi
	Framleiðsludagur
	(Bandaríkin) Varúð: Alríkislög Bandaríkjanna takmarka sölu þessa tækis við lækna eða samkvæmt beiðni þeirra.
	Fylgdu notkunarleiðbeiningunum. Notkunarleiðbeiningarnar eru á rafrænu formi (rafræn merking).
	Grüner Punkt: Tvöfalt endurvinnslukerfi í Þýskalandi

Tafla 1: Orðalisti tákna

1.2 Merking öryggisupplýsinga

 **VIÐVÖRUN**

Sé ekki farið að tilskildum ákvæðum getur það leitt til alvarlegra meiðsla, alvarlegrar skerðingar á almennu ástandi eða dauða sjúklings, notanda eða þriðja aðila.

TILKYNNING

Vöruskemmdir eða aðrar skemmdir geta komið fram ef ekki er farið að ákvæðum.

1.3 Viðbótarupplýsingar

Hlekkur til að hlaða niður þessum notkunarleiðbeiningum: ¹⁾	www.kurzmed.com/en/ifu/tym8.html
Alþjóðleg heimilisföng:	https://www.kurzmed.com/en/contact.html

¹⁾ Uppfært jafnóðum.

1.4 Öryggistengdar breytingar

Skjalnúmer	Útgáfudagur	Breytingar
0005960_01	2024-10	Heildarendurskoðun
0005960_02	2024-11	Ekkert

2 Mikilvægar öryggisupplýsingar

⚠ VIÐVÖRUN

- Áður en varan er notuð: Lestu notkunarleiðbeiningar vörunnar og fyrir allar vörur sem notaðar eru saman. Fylgdu og geymdu notkunarleiðbeiningarnar.
Annars er heilsa sjúklings þíns í hættu.
- Ekki gera breytingar á vörunni.
Annars er heilsa sjúklings í hættu.

ATHUGAÐU: Ef alvarlegt atvik hefur átt sér stað í tengslum við tækið skaltu tilkynna það til framleiðanda og lögbærs yfirvalds í aðildarríkinu þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn hefur staðfestu.

3 Vörunúmer / tilvísun

[►Forskriftir, síða 13]

4 Umfang afhendingar


[►Forskriftir, síða 13]

5 Umbúðir og dauðhreinsun

KURZ Precise Brjóschnífasett	Varan er ekki dauðhreinsuð. Pakkningar: Poki með rennilás + ytri umbúðir (samanbrjótanlegur kassi)
Brjósktöng af Schimanski gerð	Varan er ekki dauðhreinsuð. Pakkningar: Poki með rennilás + ytri umbúðir (samanbrjótanlegur kassi)
Brjósksýnistangarsett	Varan er ekki dauðhreinsuð. Pakkningar: Poki með rennilás + ytri umbúðir (samanbrjótanlegur kassi)
KURZ Precise hnífablöð (fylgihlutir / einnota efni)	Varan er dauðhreinsuð (dauðhreinsuð með geislun).

6 Lýsing vöru


6.1 Almennar upplýsingar

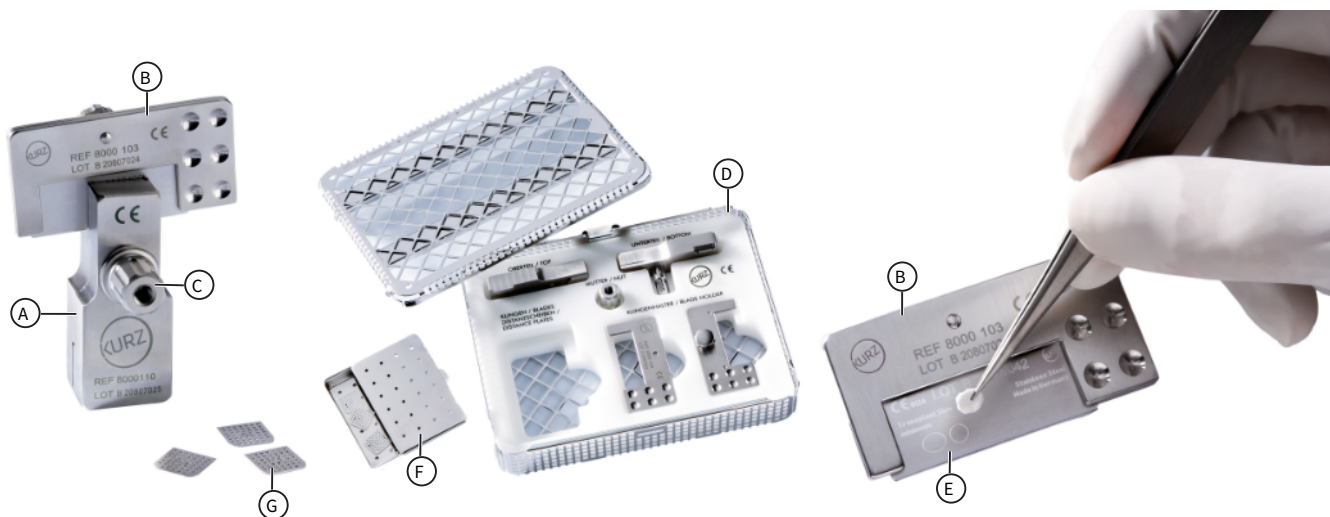

Myndskreyting 1: KURZ Precise (brjóschnífasett) KURZ Precise hnífablöð

- A Brjóschnífur: Skurðarblokk (tveir hlutar)
- B Blaðhaldari (tveir hlutar), hér með blaði; þ.m.t. skrufa til að tengja
- C Brjóschnífur: Ró
- D KURZ Precise bakki(áhal dabakki)
- E Blað (fylgihlutir / einnota efni)
- F Bakki úr ryðfríu stáli (ílát fyrir fjarlægðarplötur)
- G Fjarlægðarplötur (þykkt: 0,1 mm/0,2 mm/0,3 mm) til að búa til brjósþófa af skilgreindri þykkt

Í boði sem fylgihlutir: 1 mm fjarlægðarplata til að pressa fell. [►Forskriftir, síða 13]

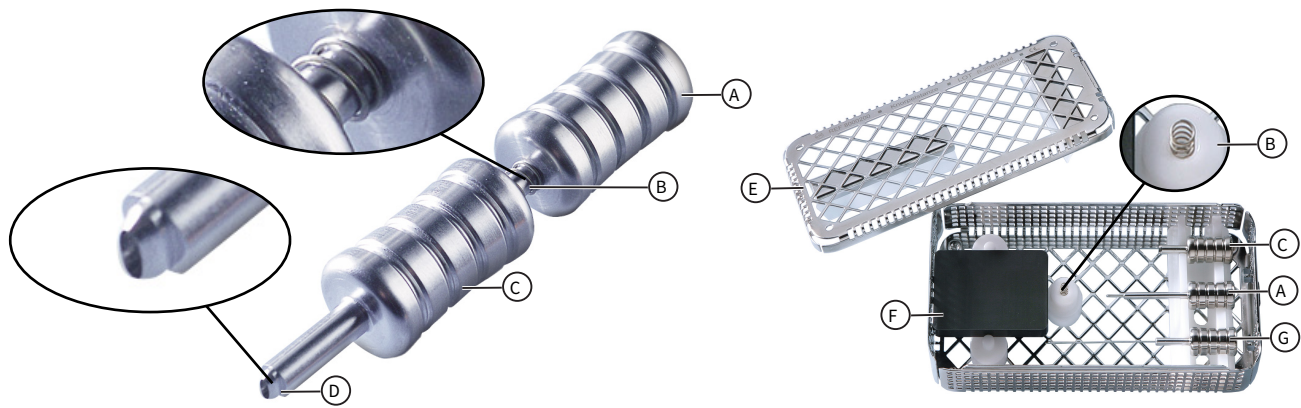

Myndskreyting 2: Brjósksýnistangarsett

- A 1. hluti: Brjósksýnishluti með hringlaga enda
- B Gormur
- C 2. hluti: Brjósksýnishluti með sporöskjulaga enda
- D Sporöskjulaga endir
- E Áhaldabakki
- F POM skurðarbretti
- G 3. hluti: Slöngvari (lengsti hluti)

Brjósktöng af Schimanski gerð : [▶ Forskriftir, síða 13]

6.2 Uppbygging og notkun

KURZ Precise Brjósksýnistangarsett í tengslum við blaðið (fylgihlutir / einnota efni)	Skurðartól sem notað er til að halda á ígræðisefni (brjósksneyðar), skera brjósksneyðar í úrval af fyrirfram skilgreindum þykktum, pressun fella.
Brjósksýnistangarsett af Schimanski gerð	Verkfæri sem er hannað til að taka um og halda brjósksneyðum tryggilega á meðan á skurði stendur.
Brjósksýnistangarsett	Handverkfæri sem notar vélrænan kraft til að skera brjósksneyðir til ígræðslu í fyrirfram skilgreinda lögun.

6.3 Efni

[▶ Forskriftir, síða 13]

Ekki gert úr náttúrulegu gúmmí (latexi).

Engar vörur úr náttúrulegu gúmmí (latexi) eru notaðar í framleiðsluferlinu.

6.4 Fylgihlutir

KURZ Precise Brjósksýnistangarsett	KURZ Precise hnífablöð (fylgir ekki með í sendingunni) 0.1/0.2/0.3 mm fjarlægðarplötur 1 mm fjarlægðarplata til að pressa fell (fylgir ekki með í sendingunni) [▶ Forskriftir, síða 13]
Brjósksýnistangarsett af Schimanski gerð	Engir fylgihlutir í boði.
Brjósksýnistangarsett	Engir fylgihlutir í boði.

6.5 Önnur tæki sem á að nota með tækinu

Að undanskilinni aðalvörunni sem notuð er (KURZ miðeyragervílfæri) eru meðhöndlunartækin fyrir brjósksneyðir ekki ætluð til notkunar með öðrum vörum.

7 Fyrirhuguð notkun

7.1 Fyrirhuguð notkun

KURZ Precise Brjósksnífasett með blaði (fylgihlutir / einnota efni)	KURZ Precise brjósksnífasettið er óvirkt, endurnýtanlegt tæki sem er notað í aðgerð og er ekki ífarandi. Það er notað til að skera brjósks í skilgreindar sneiðar til ígræðslu meðan á miðeyralögun stendur ásamt KURZ Precise hnífablöðum. KURZ Precise brjósksnífasettið er notað til að þjappa vöðvafelli í aðgerð og er ekki ífarandi. KURZ Precise blöð: KURZ Precise hnífablöðin eru óvirkt, dauðhreinsað, einnota tæki sem er notað í aðgerð og er ekki ífarandi. Það er notað til að skera brjósks ásamt KURZ Precise brjósksnífasettinu. KURZ Precise bakki: KURZ Precise bakkinn er endurnýtanlegur búnaður sem notaður er til að geyma KURZ Precise við flutninga, dauðhreinsun og geymslu. Bakki úr ryðfríu stáli: Bakkinn úr ryðfríu stáli er endurnýtanlegur búnaður sem notaður er til að geyma fjarlægðarplötur við dauðhreinsun og geymslu.
Brjóskskýng af Schimanski gerð	Brjóskskýngin er óvirkt, endurnýtanlegt tæki sem er notað í aðgerð og er ekki ífarandi. Tækið er notað til að halda brjósks sem ætlað er að skera í sneiðar til ígræðslu meðan á miðeyralögun með KURZ gervilíffæri stendur.
Brjósksýnistangarsett	Brjósksýnistangin er óvirkt, endurnýtanlegt tæki sem er notað í aðgerð og er ekki ífarandi. Hún er notuð til að gata brjósksneiðar í skilgreind sporöskjulög með miðraufum fyrir ígræðslu meðan á miðeyraígræðslu stendur með KURZ heildargervilíffæri með hringlaga holstofni. Brjósksýnistangarbakki: Brjósksýnistangarbakkinn er endurnýtanlegur búnaður sem notaður er til að geyma KURZ brjósksýnistöngina við flutninga, dauðhreinsun og geymslu.

7.2 Ábendingar

Samkvæmt aðaltækinu sem notað er (KURZ miðeyragervilíffæri).

7.3 Frábendingar

Samkvæmt aðaltækinu sem notað er (KURZ miðeyragervilíffæri).

7.4 Ætlað sjúklingaþýði

Samkvæmt aðaltækinu sem notað er (KURZ miðeyragervilíffæri).

7.5 Fyrirhugaður notandi

Fyrirhugaður notandi er læknir með reynslu af meðferð svipaðra mála með þessari vöru eða sambærilegum vörum eða læknir með eftirfarandi sérgrein:

- Háls-, nef- og eyrnafræði (otorhinolaryngology)

7.6 Áætlaður líftími

KURZ Precise Brjósksnífasett	Tíð meðhöndlun hefur lítil áhrif á þessi áhöld. Lok líftíma vörunnar byggjast venjulega á sliti og skemmdum á notkun. Skoðaðu meðhöndlunarleiðbeiningarnar.
KURZ Precise hnífablöð (fylgihlutir / einnota efni)	Einnota vara – líftími samsvarar lengd aðgerðar.
Brjóskskýng af Schimanski gerð	Tíð meðhöndlun hefur lítil áhrif á þessi áhöld. Lok líftíma vörunnar byggjast venjulega á sliti og skemmdum á notkun. Skoðaðu meðhöndlunarleiðbeiningarnar.
Brjósksýnistangarsett	Tíð meðhöndlun hefur lítil áhrif á þessi áhöld. Lok líftíma vörunnar byggjast venjulega á sliti og skemmdum á notkun. Skoðaðu meðhöndlunarleiðbeiningarnar.

7.7 Fyrirhugaður notkunarstaður

- Skurðstofa

Það er á ábyrgð notandans að ákveða í hverju tilviki fyrir sig hvaða varúðarráðstafanir þarf að gera vegna fylgikvilla sem kunna að koma upp.

8 Áætlaður klínískur ávinningur

Samkvæmt aðaltækinu sem notað er (KURZ miðeyragervilífæri).

9 Mögulegir fylgikvillar og aukaverkanir

Samkvæmt aðaltækinu sem notað er (KURZ miðeyragervilífæri).

10 Samþætting við aðrar aðgerðir

Á ekki við.

11 Geymsluþol og geymsla

Geymdu vöruna á þurrum stað og verðu hana gegn sólarljósi.

12 Meðhöndlun

KURZ Precise hnífablöð (fylgihlutir/rekstrarvörur):

⚠ VIÐVÖRUN

- Einnota vara: Ekki meðhöndla (til dæmis þrífa, sótthreinsa, dauðhreinsa), endursótthreinsa eða endurnýta vöruna. Þetta er eina leiðin til að tryggja virkni og að varan sé laus við sýkla. Vegna vélrænna eiginleika vörunnar gæti meðhöndlun eða endursótthreinsun leitt til niðurbrots á efni.

KURZ Precise brjóskhnífasett, brjóskhnífatöng, brjósksynistöng:

⚠ VIÐVÖRUN

- Varan er ekki dauðhreinsuð. Meðhöndlaðu vöruna fyrir fyrstu og frekari notkun. Þetta er eina leiðin til að tryggja virkni og að varan sé laus við sýkla. Meðhöndlun í samræmi við leiðbeiningar um meðhöndlun.

13 Leiðbeiningar fyrir notkun

⚠ VIÐVÖRUN

- Notaðu ekki vöruna ef umbúðirnar eða varan er skemmd eða útrunnin. Þetta er eina leiðin til að tryggja virkni og að varan sé laus við sýkla.
- Taktu vöruna aðeins úr umbúðunum/sótthreinsunarílátinu rétt fyrir notkun. Ef varan er tekin úr umbúðunum/sótthreinsunarílátinu skal fylgja viðeigandi reglum um hollustuhætti. Annars er heilsa sjúklings í hættu.

Tryggðu að nauðsynlegar hreinlætis- / sótthreinsiaðstæður séu til staðar fyrir inngripið.

ATHUGAÐU: Fylgdu einnig notkunarleiðbeiningunum fyrir KURZ hluta-/heildargervilífærisins.

13.1 KURZ Precise brjóskhnífur

13.1.1 Búðu til brjósk til ígræðslu af tilgreindri þykkt

13.1.1.1 Skurðarblokkinn sett saman




1. Undirbúðu skurðarblokkarhlutana: Skrúfan á neðri hluta skurðarblokkarinnar og KURZ-vörumerkið á efri hlutanum (með gati) vísa upp.



2. Settu efri hluta skurðarblokkarinnar á neðri hluta skurðarblokkarinnar þannig að skrufan fari í gegnum gatið og KURZ-vörumerkið á efri hlutanum vísi upp.
3. Snúðu efri og neðri hlutanum um 90° miðað við hvorn annan. Skrúfaðu róna lauslega á skrúfuna. Kraginn á rónni snýr niður.

13.1.1.2 Undirbúningur blaðs og blaðhaldara

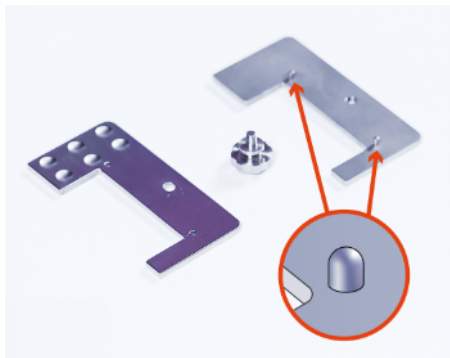

1. Fjarlægðu skrúfuna úr blaðhaldaranum. Settu blaðhaldarahlutann með pinnum (hluti 1) á slétt yfirborð þannig að pinnarnir snúi upp.




2. Taktu blaðið varlega úr dauðhreinsuðu umbúðunum.
3. Settu blaðið á 1. hluta blaðahaldarans þannig að pinnarnir séu nákvæmlega í dældum blaðsins.



4. Settu blaðhaldarahlutann án pinna (2. hluti) nákvæmlega á 1. hlutann og blaðið.
5. Festu báða blaðhaldarana hvorn við annan með skrufunni. Í þessu ferli skaltu upphaflega setja skrúfuna í gegnum 2. hlutann efst. Nú er búið að festa blaðið í blaðhaldaranum. Skurðarbrúnn skagar 1 mm út fyrir blaðhaldarann.

13.1.1.3 Undirbúningur á brjóski til ígræðslu


Skurður án fjarlægðarplötu mun framleiða 0,7 mm þykkt brjósk til ígræðslu. Notaðu fjarlægðarplötturnar til að búa til þynnri sýni. [Þynnri brjósk til ígræðslu búin til: Notkun fjarlægðarplötu, síða 10]

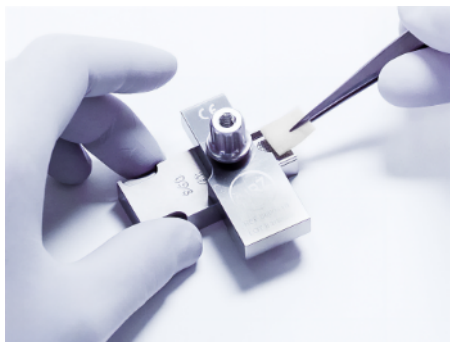

1. Settu viðeigandi brjósk til ígræðslu (hámark 12,6 x 12,6 mm) í dældina á neðri hluta skurðarblokkarinnar og snúðu brjóskhimnunni upp.




2. Snúðu efri hluta skurðarblokkarinnar þar til hún er í flútti við neðri hlutann. Hertu róna til að festa skurðarblokkina í þessari stöðu.
ATHUGAÐU: Hertu róna að því marki sem skurðarblokkarhlutarnir tveir og brjóskið eru tryggilega fest, en gakktu úr skugga um að brjóskið kremjist ekki.

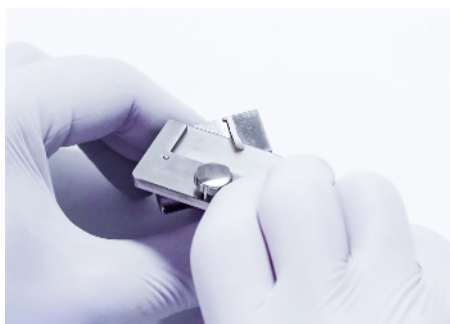

3. Láttu skurðarblokkina standa upprétta. Fjarlægðu útstætt brjósk með blaðinu.
ATHUGAÐU: Gakktu úr skugga um að útstæða brjóskið hafi alveg verið fjarlægt.

13.1.1.4 Brjósk til ígræðslu skorið

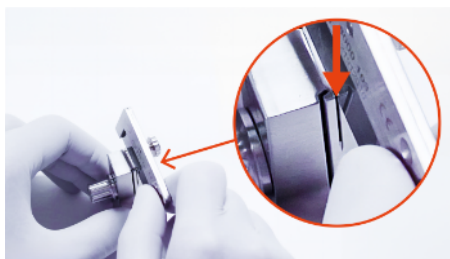

1. Settu blaðið á neðri hluta stýringarinnar og skerðu í gegnum brjóskið með því að færa blaðið eins og sög. Skildu blaðið fyrst eftir í stýringunni.



2. Settu skurðarblokkina niður, losaðu róna og snúðu efri hluta skurðarblokkarinnar um 90°.
3. Fjarlægðu brjóskþófann á blaðinu (brjóskhimna/brjóskþófi af óskilgreindri þykkt) með töng.



4. Fjarlægðu blaðið. Brjósk til ígræðslu af skilgreindri þykkt er á neðri hluta skurðarblokkarinnar. Fjarlægðu brjóskið til ígræðslu með töng.

Brjóskið til ígræðslu er nú tilbúið til notkunar eða hægt er að vinna það frekar með fjarlægðarplötum til að þynna brjóskið til ígræðslu.

13.1.1.5 Þynnri brjósk til ígræðslu búið til: Notkun fjarlægðarplötu

Búðu til brjósk til ígræðslu af skilgreindri þykkt (0,1 - 0,6 mm) með því að nota fjarlægðarplöturnar. Í því skyni skaltu nota staka fjarlægðarplötu eða blöndu af fjarlægðarplötum.

Þykkt brjóska til ígræðslu samsvarar 0,7 mm mínus þykkt fjarlægðarplatna sem notaðar eru.



Dæld skurðarblokkar
= 0,7 mm



Dæmi:

Brjósk til ígræðslu = 0,5 mm

Fjarlægðarplata = 0,2 mm

Myndskreyting 3: Þykkt brjóks til ígræðslu = 0,7 mm mínus þykkt fjarlægðarplatna



1. Settu viðkomandi fjarlægðarplötu í dældina á neðri hluta skurðarblokkarinnar.
2. Endurtaktu skrefin til að undirbúa brjóskið til ígræðslu og til að skera brjóskið til ígræðslu.

[▶ Undirbúningur á brjóski til ígræðslu, síða 8]

[▶ Brjósk til ígræðslu skorið, síða 9]

13.1.2 Fellið pressað

ATHUGAÐU: 1 mm fjarlægðarplata (REF 8000105, seld sér) er nauðsynleg til að pressa fellið. [▶ Forskriftir, síða 13]



1. Settu skurðarblokkina saman. [▶ Skurðarblokkinn sett saman, síða 7]



2. Settu 1 mm fjarlægðarplötu í dældina á neðri hluta skurðarblokkarinnar.
3. Settu fellið á fjarlægðarplötuna.



4. Snúðu efri hluta skurðarblokkarinnar þar til hún er í flútti við neðri hlutann. Hertu róna til að festa skurðarblokkina í þessari stöðu og pressaðu fellið.



5. Settu skurðarblokkina niður, losaðu róna og snúðu efri hluta skurðarblokkarinnar um 90°.
6. Fellið er á fjarlægðarplötunni. Fjarlægðu fellið með töng.

13.2 Brjósktöng af Schimanski gerð: Haldið á brjóskinu



1. Haltu brjóskinu með töng til að skera það með skurðarhníf.

13.3 Brjóksýnistöng: Brjóskskór búinn til

Brjóskskór: Brjósk til ígræðslu af skilgreindri stærð og lögun, með hringlaga gati í miðjunni. Brjóskskórinn er notaður til að tryggja stöðugleika KURZ-heildargervilíffæris með hringlaga, holskafti á ístaðsbotnplötunni. [► Forskriftir, síða 13]

Framleiðandinn mælir með því að skera brjóskið til ígræðslu í skilgreinda þykkt með því að nota KURZ Precise brjóskhníf áður en brjóskskórinn er búinn til. [► Búðu til brjósk til ígræðslu af tilgreindri þykkt, síða 7]

ATHUGAÐU: Taktu brjókskýni alltaf á skurðbrettinu. Notaðu skurðbrettið eingöngu til að taka brjókskýni.



1. Taktu brjóksýnihlutann með hringlaga endanum (1. hluti). Settu gorminn á skaftið.



2. Settu brjóksýnihlutann með sporöskjulaga endanum (2. hluti) á skaftið. Brjóksýnistöngin er tilbúið til notkunar.



3. Settu brjóskið til ígræðslu á skurðbrettið.
 4. Staðsettu enda brjóksýnistangarinnar hornrétt á brjóskið til ígræðslu. Gakktu úr skugga um að oddurinn sé fullkomlega á brjóskinu til ígræðslu.
 5. Haltu um neðri hluta brjóksýnistangarinnar (hluta 2) og þrýstu á brjóskið til ígræðslu. Í þessu ferli skaltu færa enda brjóksýnistangarinnar örlítið í hringi til að skera útlínur brjókskósins.
- ATHUGAÐU: Skerðu alveg í gegnum brjóskið til ígræðslu.



6. Haltu brjóksýnistönginni uppréttri og festu hana í stöðu. Taktu um efri hluta brjóksýnistangarinnar (hluti 1) og þrýstu á hluta 1 til að gera gat í miðju brjókskósins.



7. Brjókskórinn er nú tilbúinn til notkunar. Í þessu skyni skaltu grípa brjókskóinn með tång og setja hann á ístaðsbotnplötuna.



8. Fjarlægðu leifar úr brjóksýnistönginni. Í því skyni skaltu setja slöngvarann (hluti 3) í holskaftið á brjóksýnistönginni og ýta leifunum út úr skaftinu.

14 Förgun

⚠ VIÐVÖRUN

- Varan komst í snertingu við hugsanlega smitandi efni úr mönnum. Hreinsaðu/pakkaðu vörunni til förgunar í samræmi við sérstaka mengunarhættu.
- Annars er hættu á sýkingu fyrir notandann og fyrir þriðja aðila.

⚠ VARÚÐ

- Varan er með oddum / beittum brúnum. Til förgunar skal setja vöruna í viðeigandi stöðugt ílát.
- Annars er hættu á sýkingu fyrir notandann og fyrir þriðja aðila.

Förgun skal vera í samræmi við innlendar reglur um förgun og í samræmi við samsvarandi áhættuflokk.

15 Forskriftir

15.1 KURZ Precise brjóskhnífur

15.1.1 KURZ Precise brjóskhnífasett

Umfang afhendingar	TILVÍSUN	Efni
1 x blaðhaldari 1 x skrúfa fyrir blaðhaldara 1 x skurðarblokk, tveir hlutar 1 x ró fyrir skurðarblokk 3 x fjarlægðarplötur (þykkt: 0,1 mm/0,2 mm/0,3 mm) 1 x Bakki KURZ Precise, þar á meðal 1 x bakki úr ryðfríu stáli (ílát fyrir fjarlægðarplötur) 1 x meðhöndlunarleiðbeiningar	8000 155	Ryðfrítt stál, plast (POM, ísetningarmotta)
ATHUGAÐU: Notkun viðbótarblaða (fylgihluta) er skylda.		

15.1.2 Fylgihlutir, einnota efni og varahlutir

Atriði	TILVÍSUN	Efni	Eiginleikar
Blöð, 10x	8000 140	Ryðfrítt stál	Dauðhreinsað, sérpökkuð
Fjarlægðarplata, 1 mm til að pressa fell	8000 105	Ryðfrítt stál	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt
Þykkt fjarlægðarplatna: 0,1 / 0,2 / 0,3 mm	8000 102	Ryðfrítt stál	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt
Blaðhaldari, þ.m.t. M3 skrúfa	8000 103	Ryðfrítt stál	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt
M3 skrúfa fyrir blaðhaldara	8000 190	Ryðfrítt stál	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt
Skurðarblokk, þar á meðal M6 ró	8000 110	Ryðfrítt stál	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt
M6 ró til fyrir skurðarblokk	8000 191	Ryðfrítt stál	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt
KURZ Precise bakki, þar á meðal innsetningarplata og bakki úr ryðfríu stáli (ílát fyrir fjarlægðarplötur)	8000 177	Ryðfrítt stál Plast (POM, innsetningarplata)	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt
Bakki úr ryðfríu stáli	8000 124	Ryðfrítt stál	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt

15.2 Brjósktöng af Schimanski gerð

Umfang afhendingar	TILVÍSUN	Efni
1 x Brjósktöng af Schimanski gerð 1 x meðhöndlunarleiðbeiningar	8000 193	Ryðfrítt stál

15.3 Brjósksýnistöng

15.3.1 Brjósksýnistangarsett

Umfang afhendingar	TILVÍSUN	Efni
1 x brjósksýnistöng, þar á meðal sýnishluti með hringlaga enda, sýnishluti með sporöskjulaga enda, gormur, slöngvari 1 x POM skurðarbretti 1 x áhaldabakki 1 x meðhöndlunarleiðbeiningar	8000 200	Ryðfrítt stál, plast (POM, skurðarbretti)
Til að búa til brjóskskó fyrir eftirfarandi KURZ heildargervilffæri: TTP®-Tuebingen AERIAL Total, Duesseldorf AERIAL Total, Munich LMU AERIAL Total, Malleus Notch Total, TTP®-VARIAC System Total		

15.3.2 Varahlutir

Atriði	TILVÍSUN	Efni	Eiginleikar
Áhaldabakki fyrir brjósksýnistöng, þar á meðal innsetningarplata	8000 176	Ryðfrítt stál Plast (POM, innsetningarplata)	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt
Gormur	8000 198	Ryðfrítt stál	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt
POM skurðarbretti	8000 207	Plast (POM)	Ekki dauðhreinsað, endurnýtanlegt